

Direction régionale des laboratoires


MATÉRIELS REQUIS

- Dispositif de prélèvement de type balai;
- Flacon ThinPrep de Hologic.



MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT

Extrait de l'instruction au clinicien du MSSS

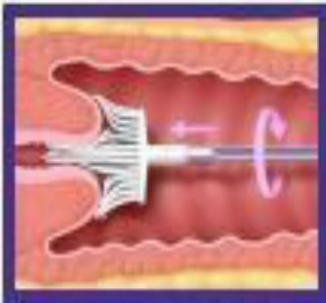

1. PRÉLÈVEMENT :

- Porter des gants.
- Pour prélever l'échantillon, introduire les poils du milieu du balai dans le canal **endocervical**.
- Enfoncer assez profondément pour que les **poils les plus courts** soient en contact avec l'**exocol**.
- Pousser avec précaution et **faire tourner le balai cinq fois dans le sens des aiguilles d'une montre**.



2. RINÇAGE :

- **Rincer le balai** dans le milieu de collecte de cellule de PreservCyt®, en la poussant **dix fois** au fond du flacon, en forçant les poils à se séparer.
- **Tourner vigoureusement** le balai afin de libérer l'échantillon cellulaire.
- **Jeter le balai** de prélèvement.
- **Ne pas laisser la tête du balai** dans le flacon.



3. FERMETURE :

- Bien serrer le bouchon de façon à ce que la ligne de pression de serrage du bouchon dépasse celle du flacon.
- L'échantillon est prêt pour le transport.



4. IDENTIFICATION :

- Identifier le spécimen avec double identification et inscrire les informations du patient et ses antécédents médicaux sur la requête régionale de laboratoire.
- Pour les cliniques utilisant le logiciel SoftLab, apposer l'étiquette codes à barres dans le sens de la longueur, entête vers le bas.



DATE : 2025-04-09
Révisé le :

APPROUVÉ PAR :

Dr Anton Mak, MD, MSc, FRCPC, Microbiologiste-infectiologue

Direction régionale des laboratoires

Conservation de l'échantillon :

Le spécimen se conserve entre 15 et 30°C
Le laboratoire doit recevoir les échantillons le plus tôt possible
et **maximum** 7 jours suivant le prélèvement.

Identification de l'échantillon :

Nom et prénom complet
RAMQ (ou #dossier)
Heure de prélèvement

L'échantillon sera rejeté s'il y a :

Excès de sang (plus de 2% v/v). Un tel spécimen présente une coloration rouge ou marron foncé dans le milieu de prélèvement.

**Double identification patient incorrecte.
Étiquette d'identification patient non conforme**

Étiquette identification patient conforme :

Dimension maximale : L : 9 cm et H: 4.5 cm
Apposée sur le code QR noir
Ne pas cacher la fenêtre du pot



Étiquette identification patient non conforme:

Ne répond pas aux critères mentionnés à gauche
Étiquette qui touche au couvercle



IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Inscrire les renseignements suivants sur le contenant :

- Nom et prénom;
- Numéro d'assurance maladie (RAMQ) ou votre numéro de dossier de l'hôpital;
- **Date et** l'heure du prélèvement.

ACHEMINEMENT

- a) **Ne pas mettre** le formulaire de demande d'analyses (prescription du médecin) dans le même sac que l'échantillon;
- b) Acheminer les échantillons vers le laboratoire en respectant la procédure de transport PRO-DRL-LAB002 Procédure – Transport des marchandises dangereuses interétablissement